

Forme et présentation :

Crème dermique en flacon airless de 70 g.

Composition :

L'acide Hyaluronique, sel sodique (0,2%), Eau Purifiée, PEG-400 Stéarate, Oléate de Décyle, PEG-8 Beeswax, Cire Emulsionnante, Glycérine, Sorbitol, Acétate de Sodium Trihydraté, Parfum, Parahydroxybenzoate de méthyle, Acide sorbique, Parahydroxybenzoate de propyle, Hydroxyde de Sodium.

Propriétés :

L'acide hyaluronique est un mucopolysaccharide d'origine biologique, qui constitue un composant essentiel du derme responsable de son hydratation, de sa réparation et de sa régénération.

IALUSKIN® Crème est un dispositif médical. Il fait intervenir son constituant principal, l'acide hyaluronique, pour agir dans toutes les étapes du processus de cicatrisation et de régénération.

Grâce à son action de stimulation de la formation et de la réparation des tissus dermiques, IALUSKIN® Crème accélère les mécanismes de cicatrisation et de ré-épithélialisation des lésions et plaies mineures et des brûlures de faible étendue.

En outre, IALUSKIN® Crème présente des propriétés hydratantes qui lui permettent d'éviter le dessèchement de la peau, en maintenant la zone à traiter dans un environnement humide, favorisant la régénération des tissus et l'apaisement des démangeaisons des peaux irritées.

Indications :

IALUSKIN® est une crème à triple action « réparatrice – hydratante – apaisante » pour aider à la cicatrisation des peaux lésées et irritées.

Il est indiqué dans les cas suivants :

- Ecorchures, coupures légères, marques de bouton, irritations cutanées, gerçures.
- Hydratation des peaux lésées, notamment celles agressées par le soleil.
- Après les petites interventions dermatologiques à visée esthétique : peeling, laser, injection ...

Mode d'emploi et Posologie :

Appliquer IALUSKIN® Crème 2 à 3 fois par jour, en fine couche d'environ 2 à 3 mm d'épaisseur, uniformément sur la totalité de la zone à traiter.

Il est recommandé de se laver les mains avant et après chaque utilisation de IALUSKIN® Crème.

Avant application, il est nécessaire de procéder au nettoyage et à la désinfection de la peau irritée ou des lésions et de leurs contours. Il est notamment recommandé d'enlever les résidus de crème provenant d'une application précédente.

Il est conseillé de continuer les applications jusqu'à ce que la plaie soit complètement cicatrisée.

Ne pas dépasser 30 jours de traitement.

Lors de la première utilisation, il est souvent nécessaire d'appuyer plusieurs fois de façon répétitive sur la pompe jusqu'à ce que la crème sorte du diffuseur.

Dans le cas d'une personne non autosuffisante, le recours à l'assistance d'une autre personne est possible.

Effets non souhaités et gênants :

Dans de très rares cas, des réactions locales d'hypersensibilité de type eczéma ont été observées.

Contre-indications :

- Ne pas utiliser IALUSKIN® Crème en cas d'hypersensibilité connue à l'un de ses constituants. Si des réactions locales d'hypersensibilité persistent, consultez votre médecin.
- Ne pas utiliser IALUSKIN® Crème dans le cas de plaies graves, profondes et très souillées.
- Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.
- Si vous êtes enceintes ou allaitante, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser IALUSKIN®.

Précautions d'emploi/ Mise en garde :


- Tenir hors de la portée des enfants.
 - Pour usage externe uniquement. Ne pas avaler.
 - Les interactions avec d'autres produits n'étant pas connues, il est donc recommandé de demander conseil à un médecin avant d'utiliser IALUSKIN® Crème en association avec d'autres dispositifs médicaux ou médicaments à usage local.
 - Respecter les conseils et méthodes de nettoyage et de désinfection des plaies et de leurs contours.
 - Avant chaque utilisation éliminer la crème collée à l'extrémité du diffuseur et nettoyer soigneusement son embout.
 - Ne pas appliquer l'embout du diffuseur du flacon airless directement sur la plaie ou la zone à traiter.
 - Refermer le produit immédiatement après utilisation.
 - La date de péremption concerne un produit fermé et conservé dans des conditions adéquates.
 - Ne jetez pas le dispositif médical au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des dispositifs médicaux qui ne sont plus utilisés.
- Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

IALUSKIN® est un dispositif médical. Ne pas utiliser pour un usage cosmétique.

Conservation

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur. Ce dispositif médical doit être conservé à une température inférieure à 25°C. A utiliser dans les 12 mois après ouverture.

Date de révision de la notice : Février 2023

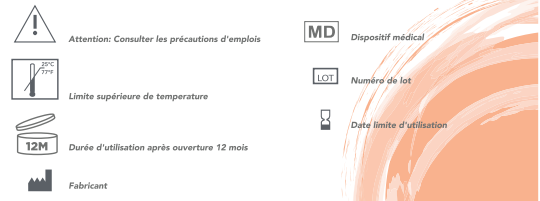

Laboratoires Opalia Pharma S.A., Recordati group
Z.I. Kalaât El Andalou 2022 Ariana - Tunisie - Tunisia

Presentation:

Dermal cream in a 70 g airless bottle.

Composition:

Hyaluronic Acid, sodium salt (0.2%), Purified Water, PEG-400 Stearate, Decyl Oleate, PEG-8 Beeswax, Emulsifying Wax, Glycerin, Sorbitol, Sodium Acetate Trihydrate, Perfume, Methyl Parahydroxybenzoate, Sorbic Acid, Propyl Parahydroxybenzoate, Sodium Hydroxide.

Properties:

Hyaluronic acid is a mucopolysaccharide of biological origin, which is an essential component responsible for the hydration, reparation and regeneration of the dermis.

IALUSKIN® Cream is a medical device. It involves its main constituent, hyaluronic acid, to act in all stages of the wound healing process and regeneration.

By stimulating the formation and reparation of dermal tissues, IALUSKIN® Cream accelerates healing and re-epithelialization mechanisms of minor lesions and small size burns.

Indeed, IALUSKIN® Cream has moisturizing properties that allow it to prevent skin drying, keeping the treated area in a moist environment, promoting tissue regeneration and soothing itchy irritated skin.

Indications:

IALUSKIN® is a cream with triple action «reparative - moisturizing - soothing» intended to help the healing of damaged and irritated skin.

It is indicated in the following cases:

- Grazes, minor cuts, pimple traces, skin irritations, chapping.
- Moisturizing of damaged skin, particularly those attacked by the sun.
- After small dermatological interventions for aesthetic purposes: peeling, laser, injection...

Instructions for use and Dosage:

IALUSKIN® Cream should be applied 2 to 3 times a day, in a thin layer of approximately 2-3 mm, uniformly on the whole area to be treated.

It is recommended to wash your hands before and after each use of IALUSKIN® Cream.

Before application, it is necessary to clean and disinfect the irritated skin or lesions and their contours.

It is especially recommended to remove residual cream, left on the skin from a previous application.

It is advisable to continue the applications until the wound is completely healed.

Do not exceed 30 days of treatment.

On the first use, it is often necessary to press the pump many times, repeatedly, until the cream comes out of the diffuser.

In the case of a person who is not self-sufficient, recourse to the assistance of another person is possible.

Side and troublesome effects:

In very rare cases, local eczema type hypersensitivity reactions have been observed.

Contraindications:

- Do not use IALUSKIN® Cream in case of known hypersensitivity to any of its constituents.
- If local hypersensitivity reactions persist, consult your doctor.
- Do not use IALUSKIN® Cream in the case of serious, deep and very soiled wounds.
- Avoid all contact with the eyes and mucous membranes.
- Ask your doctor or pharmacist for advice during pregnancy or while breastfeeding, before using IALUSKIN®.

Precautions for use / Warnings

- Keep out of reach of children.
- For external use only. Do not swallow.
- Since interactions with other products are not known, it is recommended to seek medical advice before

using IALUSKIN® Cream in combination with other medical devices or local-use medications.

- Follow precautions and methods for cleaning and disinfecting wounds and their contours.
 - Before each use remove the glued cream on the diffuser end, and clean its tip carefully.
 - Do not apply the tip of the diffuser of the Airless bottle directly on the wound or treatment area.
 - Close the product immediately after use.
 - The expiry date relates to a closed and stored under proper conditions.
 - Do not dispose of the medical device in the sewage system or with household waste. Ask your pharmacist what to do with medical devices that are no longer used.
- These measures will help protect the environment.

IALUSKIN® is a medical device. Not for cosmetic use.

Storage conditions:

Do not exceed the expiry date stated on the outer packaging.

This medical device should not be stored above 25°C.

To be used within 12 months after opening.

Leaflet revision date : February 2023



Caution : Consult the precautions of use.



Upper temperature limit



Shelf life after opening 12 months



Manufacturer



Medical device



Batch number



Expiry date



Laboratoires Opalia Pharma S.A., Recordati group
Z.I. Kalaât El Andalous 2022 Ariana - Tunisia - Tunisia