

• Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice : elle contient des informations importantes pour l'utilisateur.
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

ACC0007/V1



Utiliser un suppositoire par jour, de préférence le soir avant de se coucher ou selon la prescription médicale. La durée d'utilisation dépend de l'évolution des symptômes ; le cas échéant, les suppositoires IALU Proct® peuvent être utilisés pendant des périodes prolongées.



Attention: Consulter les précautions d'emploi

MD Dispositif médical

Limite supérieure de température

LOT Nombre de lot

Fabricant

Date limite d'utilisation



Laboratoires Opalia Pharma S.A., Recordati group
Z.I. Kalbat El Andalouss 2022 Ariana - Tunisie - Tunisia



Forme et présentation

IALU Proct® se présente sous forme de suppositoires à usage rectal. La boîte contient 10 suppositoires de 2 g.

Composition

Acide hyaluronique sel sodique (5mg), glycérides semi synthétiques, Centella asiatica, Calendula officinalis, Aloe vera, Melaleuca huile essentielle, BHT
..... q.s.p. 1 suppositoire.

Propriétés

L'acide hyaluronique est un mucopolysaccharide d'origine biologique, qui constitue un composant essentiel de nombreux tissus corporels responsable de leur hydratation, de leur réparation et de leur régénération. Plusieurs études ont démontré la capacité de l'acide hyaluronique à accélérer et à améliorer le processus d'épithélialisation et de réparation tissulaire.

IALU Proct® suppositoire est un dispositif médical. Il fait intervenir son constituant principal, l'acide hyaluronique, pour favoriser la cicatrisation en accélérant le processus de réparation des lésions anales.

Indications


IALU Proct® suppositoire est un traitement adjuvant des processus de réparation des lésions anales suite à :

- Une chirurgie proctologique
- Hémorroïdes internes ou externes
- Proctites
- Cryptites (inflammation du rectum et/ou de l'anus ou des cryptes anales)
- Rhagades anales
- Fissures
- Fistules péri-anales.

Mode et durée d'utilisation

Retirer le suppositoire de l'emballage en tirant les deux languettes prédécoupées du blister. Insérer le suppositoire dans le rectum.

Par souci d'hygiène, il est recommandé de se laver les mains avant et après chaque utilisation de ce dispositif médical.

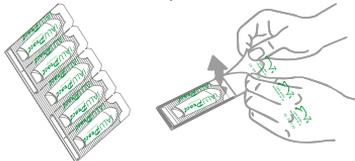

Contre-indications

- Ne pas utiliser IALU Proct® en cas d'hypersensibilité individuelle à l'un des composants du produit.

Interactions

Ne pas utiliser IALU Proct® en association avec des dispositifs médicaux ou médicaments à usage rectal sans avoir préalablement consulté un médecin.

Précautions d'emploi / Mise en garde

- L'utilisation de tout produit à usage local, particulièrement pendant une période prolongée, peut provoquer une sensibilisation. Dans ce cas, il est conseillé d'interrompre le traitement et de consulter un médecin afin d'entamer un traitement approprié. Si d'autres effets indésirables surviennent, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Si vous êtes enceinte ou allaitante, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser IALU Proct® suppositoire.

- Ne pas avaler.
- Eviter tout contact avec les yeux.
- La date de péremption fait référence au produit dans son emballage fermé et conservé dans des conditions adéquates.

- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption ou si celui-ci est ouvert ou endommagé.
- Ne jetez pas le dispositif au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des dispositifs médicaux qui ne sont plus utilisés. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Conservation

Conserver le dispositif médical à l'abri de la lumière et de la chaleur, de préférence à une température entre 4°C et 25°C.

Date de révision du texte : Mai 2025.



Please read this entire instructions for use's leaflet carefully; it contains important information for the user. Keep this leaflet; you may need to read it again.

ACC0007/11



Form and presentation

IALU Proct® is in the form of suppositories for rectal use. The box contains 10 suppositories of 2 g.

Composition

Hyaluronic acid sodium salt (5mg), hemisynthetic glycerides, Centela Asiatica, Calendula officinalis, Aloe vera, Melaleuca Essential oil, BHT s.q.f. 1 suppository.

Properties

Hyaluronic acid is a mucopolysaccharide of biological origin, which is an essential component of many body tissues responsible for their hydration, repair and regeneration. Several studies have demonstrated the ability of hyaluronic acid to accelerate and improve the process of epithelialization and tissue repair.

IALU Proct® suppository is a medical device. It involves its main constituent, hyaluronic acid, which promotes healing by accelerating the process of repairing anal lesions.

Indications


IALU Proct® Suppository is an adjuvant treatment of anal lesions repair processes following:

- Proctologic surgery
- Internal or external hemorrhoids
- Proctitis
- Cryptitis (inflammation of the rectum and / or anus or anal crypts)
- Anal rhagades
- Cracks
- Perianal fistulas.

Mode and duration of use

Remove the suppository from its package by pulling the two pre-cut tabs of the blister. Insert the suppository into the rectum.

For hygiene reasons, it is recommended to wash your hands before and after each use of this medical device.

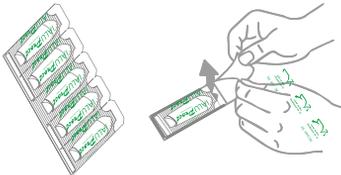

Use a suppository a day, preferably in the evening before going to bed or as prescribed by the doctor.

The duration of use depends on the evolution of symptoms; if necessary, IALU Proct® suppositories can be used for prolonged periods.

Contraindications

- Do not use IALU Proct® in case of individual hypersensitivity to any of the product's constituents.

Interactions

Do not use in combination with other rectal medical devices or medicines without first consulting a doctor.

Precautions for use / Warnings

- Prolonged use of any product for local use may cause sensitization. In this case, it is advisable to discontinue use of the treatment and consult a doctor to initiate appropriate treatment. If any other side effects occur, please inform your doctor or pharmacist.

- Keep out of reach of children.
- If you are pregnant or breastfeeding, ask your doctor or pharmacist for advice before using IALU Proct® suppository.
- Do not swallow
- Avoid any contact with eyes.
- The expiry date refers to a product in its closed packaging and stored under appropriate conditions. Do not use the product after the expiry date or if it is open or damaged.
- Do not dispose of the medical device in the sewage system or with household waste. Ask your pharmacist what to do with medical devices that are no longer used. These measures will help protect the environment.

Storage conditions

Keep the medical device away from light and heat, preferably at a temperature between 4°C and 25°C.

Text's revision date : May 2025.



Manufacture: Laboratories Opalia Pharma S.A., Recordati group
Z.I. Koladji Et Anadou 2022 Anania - Tunisie - Tunisia

